

残留農薬試験用

農薬混合標準液70 (ポジティブリスト制度 GC/MS 対象83種混合)

Pesticides Standard Solution 70




● 成分

- |  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| 1. XMC   | 19. ホスファミド <sup>ン</sup>   | 37. ジ <sup>ン</sup> フェナミト <sup>ド</sup>  | 52. DEF (トリ <sup>ブ</sup> ホス)  | 70. プ <sup>ロ</sup> パ <sup>ル</sup> キ <sup>ット</sup> -1                              |
| 2. テクナゼ <sup>ン</sup>                               | 20. プ <sup>ロ</sup> モ <sup>ブ</sup> チト <sup>ド</sup>                                 | 38. ジ <sup>ン</sup> メタメトリン  | 53. フラム <sup>ブ</sup> ロップ <sup>メ</sup> チル  | プ <sup>ロ</sup> パ <sup>ル</sup> キ <sup>ット</sup> -2                                  |
| 3. プ <sup>ロ</sup> パ <sup>ク</sup> ロール               | 21. アセト <sup>ク</sup> ロール  | 39. アレスリン-1  | 54. プ <sup>ロ</sup> フ <sup>ロ</sup> フェジ <sup>ン</sup>                                | 71. ジ <sup>ク</sup> ロ <sup>ホ</sup> ップ <sup>メ</sup> チル                              |
| 4. プ <sup>ロ</sup> ホ <sup>キ</sup> シル                | 22. クロ <sup>ル</sup> ビ <sup>リ</sup> ホス <sup>メ</sup> チル                             | アレスリン-2  | 55. プ <sup>ロ</sup> ビ <sup>リ</sup> メート   | 72. ビ <sup>リ</sup> ダ <sup>ン</sup> フェン <sup>チ</sup> オン                             |
| 5. ベン <sup>フル</sup> ラリン                            | 23. プ <sup>ロ</sup> パ <sup>ニ</sup> ル   | アレスリン-3  | 56. オキシ <sup>フル</sup> オル <sup>フェ</sup> ン  | 73. プ <sup>ロ</sup> モ <sup>ブ</sup> ロ <sup>ビ</sup> レート                              |
| 6. モノ <sup>クロ</sup> ト <sup>ホ</sup> ス               | 24. ビ <sup>ン</sup> ク <sup>ロ</sup> ゾ <sup>リ</sup> ン                                | アレスリン-4  | 57. (Z)-メ <sup>ト</sup> ミ <sup>ノ</sup> スト <sup>ロ</sup> ビ <sup>ン</sup>              | 74. ビ <sup>ロ</sup> ホ <sup>ス</sup>   |
| 7. ジ <sup>ク</sup> ロ <sup>ラ</sup> ン                 | 25. メ <sup>タ</sup> ラ <sup>キ</sup> シル  | 40. ジ <sup>メ</sup> ヒ <sup>レ</sup> ート   | 58. アサ <sup>コ</sup> ナ <sup>ゾ</sup> ール   | 75. ホス <sup>メ</sup> ット  |
| 8. カ <sup>ル</sup> ボ <sup>フ</sup> ラン                | 26. ア <sup>メ</sup> ト <sup>リ</sup> ン   | 41. メ <sup>チ</sup> タ <sup>チ</sup> オン   | 59. イ <sup>マ</sup> サ <sup>メ</sup> タ <sup>ベ</sup> ン <sup>ス</sup> メ <sup>チ</sup> ル  | 76. メ <sup>ト</sup> キ <sup>シ</sup> ク <sup>ロ</sup> ール                               |
| 9. シ <sup>マ</sup> ジ <sup>ン</sup>                   | 27. プ <sup>ロ</sup> メ <sup>ト</sup> リ <sup>ン</sup>                                  | 42. テ <sup>ト</sup> ラ <sup>ク</sup> ロ <sup>ル</sup> ビ <sup>ン</sup> ホ <sup>ス</sup>   | 60. イ <sup>ツ</sup> キ <sup>サ</sup> チ <sup>オ</sup> ン                                | 77. フェ <sup>ノ</sup> トリ <sup>ン</sup> -1  |
| 10. キ <sup>ント</sup> ゼ <sup>ン</sup>                 | 28. エ <sup>ト</sup> フ <sup>メ</sup> セート   | 43. フェ <sup>ノ</sup> チ <sup>オ</sup> カル <sup>ブ</sup>                               | 61. エ <sup>チ</sup> オン   | フェ <sup>ノ</sup> トリ <sup>ン</sup> -2  |
| 11. ク <sup>ロ</sup> マ <sup>ゾ</sup> ン                | 29. プ <sup>ロ</sup> マ <sup>シ</sup> ル   | 44. フ <sup>ル</sup> ト <sup>リ</sup> ア <sup>ホ</sup> ール                              | 62. オ <sup>キ</sup> サ <sup>ジ</sup> キ <sup>シ</sup> ル                                | 78. テ <sup>ト</sup> ラ <sup>ジ</sup> ホ <sup>ン</sup>                                  |
| 12. ア <sup>ト</sup> ラ <sup>ジ</sup> ン                | 30. キ <sup>ノ</sup> ク <sup>ラ</sup> ミン  | 45. ナ <sup>プ</sup> ロ <sup>バ</sup> ミ <sup>ト</sup>                                 | 63. フ <sup>ル</sup> ア <sup>ク</sup> リ <sup>ビ</sup> リ <sup>ム</sup>                   | 79. ビ <sup>ラ</sup> ゾ <sup>ホ</sup> ス   |
| 13. シ <sup>ア</sup> ノ <sup>ス</sup>                  | 31. フェ <sup>ン</sup> プ <sup>ロ</sup> ビ <sup>モ</sup> ル <sup>フ</sup>                  | 46. フェ <sup>ナ</sup> ミ <sup>ホ</sup> ス   | 64. ベ <sup>ナ</sup> ラ <sup>キ</sup> シル  | 80. フェ <sup>ン</sup> プ <sup>コ</sup> ナ <sup>ゾ</sup> ール                              |
| 14. プ <sup>ロ</sup> ビ <sup>サ</sup> ミ <sup>ト</sup>   | 32. ク <sup>ロ</sup> ル <sup>タ</sup> ール <sup>ジ</sup> メ <sup>チ</sup> ル                | 47. (E)-メ <sup>ト</sup> ミ <sup>ノ</sup> スト <sup>ロ</sup> ビ <sup>ン</sup>             | 65. カ <sup>ル</sup> フェ <sup>ン</sup> ト <sup>ラ</sup> ゾ <sup>ン</sup> エ <sup>チ</sup> ル | 81. フ <sup>ル</sup> ミ <sup>オ</sup> キ <sup>サ</sup> ジ <sup>ン</sup>                   |
| 15. イ <sup>サ</sup> ゾ <sup>ホ</sup> ス                | 33. ト <sup>リ</sup> ア <sup>ジ</sup> メ <sup>ホ</sup> ン                                | 48. プ <sup>ロ</sup> フェ <sup>ノ</sup> ホ <sup>ス</sup>                                | 66. ト <sup>リ</sup> フ <sup>ロ</sup> キ <sup>シ</sup> スト <sup>ロ</sup> ビ <sup>ン</sup>   | 82. フ <sup>ル</sup> ミ <sup>ク</sup> ロ <sup>ア</sup> ック <sup>ヘ</sup> ン <sup>チ</sup> ル |
| 16. ト <sup>リ</sup> ア <sup>レ</sup> ート               | 34. ニ <sup>ト</sup> ロ <sup>タ</sup> ール <sup>イ</sup> ソ <sup>ブ</sup> ロ <sup>ビ</sup> ル | 49. イ <sup>ソ</sup> プ <sup>ロ</sup> チ <sup>オ</sup> ラ <sup>ン</sup>                  | 67. キ <sup>ノ</sup> キ <sup>シ</sup> フ <sup>エ</sup> ン                                | 83. ト <sup>ル</sup> フ <sup>エ</sup> ン <sup>ビ</sup> ラ <sup>ト</sup>                   |
| 17. イ <sup>ブ</sup> ロ <sup>ベ</sup> ン <sup>ホ</sup> ス | 35. プ <sup>ロ</sup> モ <sup>ホ</sup> ス <sup>メ</sup> チ <sup>ル</sup>                   | 50. イ <sup>ツ</sup> キ <sup>サ</sup> チ <sup>オ</sup> ン <sup>オ</sup> キ <sup>ソ</sup> ン | 68. ノ <sup>ル</sup> フ <sup>ラ</sup> ゾ <sup>ン</sup>                                  |   |
| 18. ベ <sup>ノ</sup> キ <sup>サ</sup> コ <sup>ール</sup>  | 36. フ <sup>サ</sup> ライ <sup>ト</sup>  | 51. オ <sup>キ</sup> サ <sup>ジ</sup> ア <sup>ゾ</sup> ン                               | 69. ヘ <sup>キ</sup> サ <sup>ジ</sup> ノ <sup>ン</sup>                                  |   |

<クロマトグラム例>

(各 10 mg/L アセトン-ヘキサン溶液(1:1))

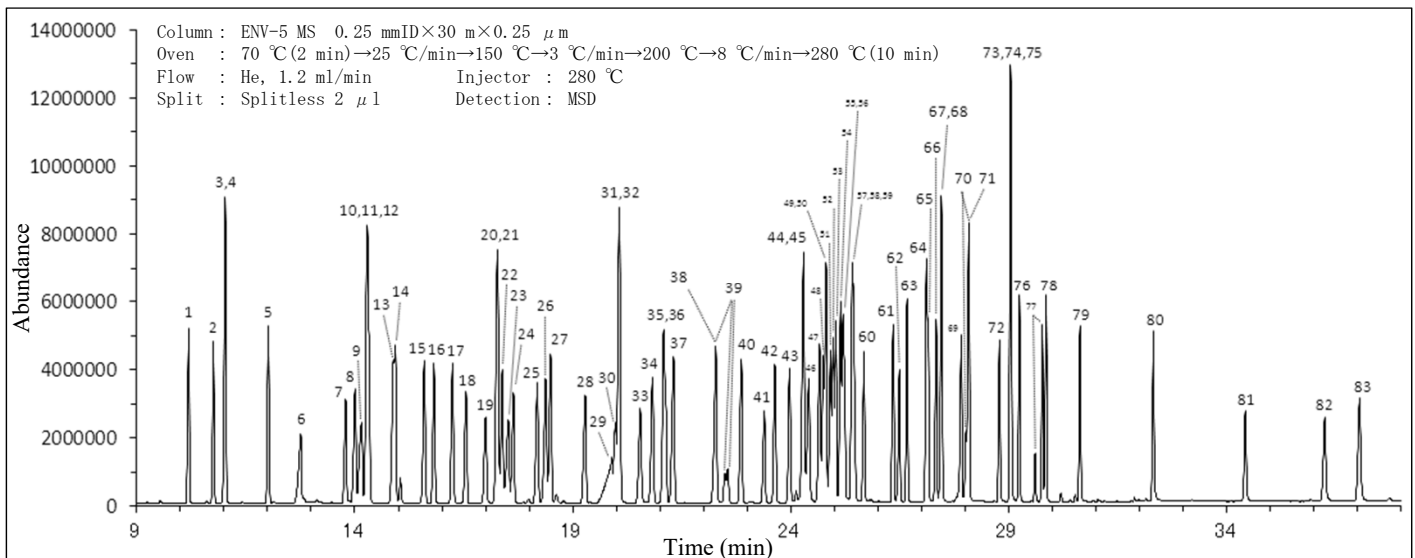

● 使用上の注意

溶液は、溶媒の揮散による濃度変化をなくすため、アンプルに入れてあります。


1. 一定の場所を定め、冷凍保管(-20℃以下)して下さい。
2. 取扱い中は必要に応じ、防毒マスク、保護手袋を着用して下さい。
3. 取扱い作業場所には、局所排気装置を設けて下さい。
4. アンプル開封後は直ちに使用し、使用後の溶液は廃棄して下さい。

<アンプルのカット方法>

アンプル首部を清浄に拭き取った後、右図の様に“白点”(マーク下のカット部に傷が付いています)の反対方向に折り曲げるように力を加えると簡単にカットできます。

<アンプル開封時の注意>

1. アンプルのカット時は、保護具、保護手袋等を必ず着用して下さい。
2. 白点部分と異なる場所を無理に折り曲げると、アンプルが破損する恐れがあります。
3. カット後の切断面には触らない様注意して下さい。

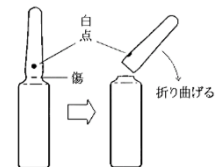

関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>